



Fremanezumab (s.c. a-CGRP)

Gebrauchsanweisung für den Fertigpen

Fremanezumab 225 mg im Fertigpen zur Vorbeugung von Migräne bei Erwachsenen, bei denen mindestens 4 Migränetage im Monat auftreten.

Vor der Verwendung des Fremanezumab Fertigpens lesen Sie bitte die Schritt-für-Schritt-Anleitung und befolgen Sie diese sorgfältig.

Injektion vorbereiten


- Nehmen Sie den Fertigpen Fertigpen aus der Verpackung. **Nicht schütteln.**
- Warten Sie vor der Injektion **30 Minuten**, bis Fremanezumab Raumtemperatur erreicht hat.
- Legen Sie die folgenden Gegenstände bereit:
 - 1 bzw. 3 Fremanezumab Fertigpen(s) à 225 mg, je nach Verschreibung durch Ihren Arzt
 - Alkoholtupfer ➤ Mullkompressen oder Wattebäusche ➤ Kanülenabwurfbehälter.

Wichtig:

- D'Fremanezumab-Fäerdegspätz ass nämme fir den Eemolgebrauch bestimmt.
- Jeder Fertigpen enthält 225 mg Fremanezumab. Je nach festgelegter Dosierung müssen Sie 1 Fertigpen oder 3 Fertigpens verwenden.
- Fremanezumab wird unter die Haut gespritzt (subkutane Injektion). Sie dürfen sich keine Selbstinjektion verabreichen, wenn Sie vorab nicht von Ihrem Arzt oder anderem medizinischen Fachpersonal angeleitet wurden.
- Lesen Sie die Packungsbeilage sorgfältig durch, um mehr über dieses Arzneimittel zu erfahren.
- Schütteln Sie den Fertigpen **nicht**.
- **Legen Sie den Umkarton umgehend zurück in den Kühlschrank**, wenn er weitere ungebrauchte Fertigpens enthält.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Durchführung der Injektion

Schritt 1: Waschen Sie sich die Hände mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie mit einem sauberen Handtuch sorgfältig ab.


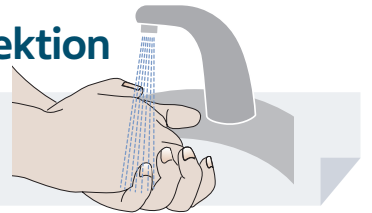


Schritt 2: Überprüfen Sie den Fertigpen mit Fremanezumab auf Folgendes;

- Die Bezeichnung Fremanezumab ist auf dem Fertigpen angegeben.
- Das Verfallsdatum auf dem Etikett ist nicht überschritten.
- Das Flüssigarzneimittel im Fertigpen ist klar und sieht farblos bis leicht gelblich aus.

Nicht verwenden, wenn:

- der pen länger als 7 Tagen außerhalb des Kühlschranks war,
- das Verfallsdatum des Pens überschritten ist,
- der Pen sichtbare Beschädigungen wie Risse oder Leckagen aufweist,
- in der Flüssigkeit Partikel vorhanden sind oder sie verfärbt trüb oder gefroren ist (bzw. war).


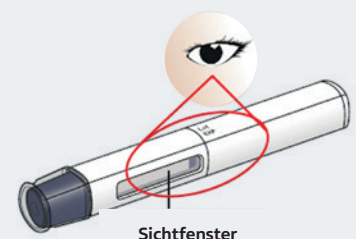
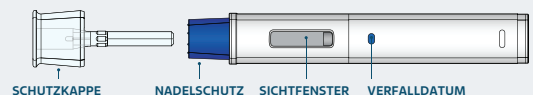


Möglicherweise sind im Fertigpen Luftblasen zu sehen. Das ist normal. Versuchen Sie nicht, die Luftblasen vor der Injektion aus dem Fertigpen zu entfernen.

Schritt 3:

Wählen Sie die Injektionsstelle aus.

- Abdomen (Unterbauch): Halten Sie einen Abstand von ungefähr 5 cm um den Nabel ein.
- Vorderseite der Oberschenkel: In einem Bereich von mindestens 5 cm über dem Knie und 5 cm unterhalb der Leiste.
- Rückseite des Oberarms: Im fleischigen Bereich an der Rückseite des Oberarms.

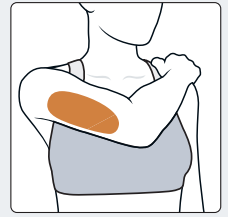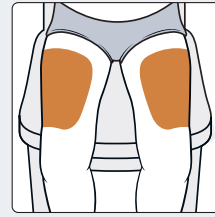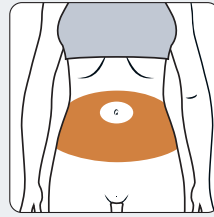

Wenn mehrere Injektionen erforderlich sind, können diese im gleichen oder in unterschiedlichen Bereichen (Bauch, Oberschenkel, Oberarm) verabreicht werden. Achten Sie darauf, dass Sie nicht an genau derselben Stelle injizieren.


Schritt 4:

Reinigen Sie die Injektionsstelle.

- Reinigen Sie die Injektionsstelle mit einem frischen Alkoholtuch.
- Lassen Sie die Haut vor der Injektion 10 Sekunden trocknen.
- Injizieren Sie Fremanezumab nicht in einem Bereich, der empfindlich, gerötet, heiß, verhärtet oder tätowiert ist bzw. der Blutergüsse, Narben oder Dehnungstreifen aufweist.

Schritt 5: Entfernen Sie die Schutzkappe und legen Sie sie beiseite.

- Ziehen Sie die Schutzkappe in gerader Richtung ab. Nicht drehen.
- Setzen Sie die Schutzkappe nicht wieder auf den Pen, um Verletzungen und Infektionen zu vermeiden.
- Berühren Sie nicht den Nadelschutzbereich.

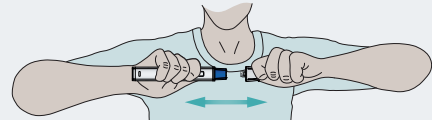

Schritt 6:

- Setzen Sie den Fertigpen in einem Winkel von 90 Grad auf die Haut.
- Drücken Sie den Pen nach unten, um ihn zu aktivieren. Es gibt keinen Knopf. Sie hören ein **KLICKEN**. Der blaue Kolben bewegt sich durch das Fenster nach unten.
- Halten Sie den Pen ungefähr **15 Sekunden** auf Ihre Haut gedrückt, bis Sie ein zweites **KLICKEN** hören.
- Warten Sie jetzt noch **10 Sekunden**, bevor Sie den Pen von der Haut nehmen.


Dauer: 30 Sekunden
Hinweis: Halten Sie den Pen während der gesamten Injektion mit **konstantem Druck** auf die Injektionsstelle

Schritt 6A-B	Schritt 6C	Schritt 6D	Schritt 6E
ERSTE KLICKEN	15 Sekunden	ZWEITES KLICKEN	10 Sekunden
Blauer Kolben beginnt sich zu bewegen.	Nach dem ersten Klicken 15 Sekunden warten.	Der blaue Kolben bewegt sich bis ans Ende des Sichtfensters	Nach dem zweiten Klicken 10 Sekunden warten.
			Pen aus der Haut entfernen, siehe Schritt 7

Schritt 7:

Entfernen Sie den Pen von der Haut.

Vergewissern Sie sich, dass der blaue Kolben das Sichtfenster vollständig ausfüllt und Sie den grauen Stopfen sehen. Nehmen Sie den Pen in gerader Richtung von der Haut. Wenn Sie den Pen aus der Haut ziehen, geht der Nadelschutz wieder in seine ursprüngliche Position und rastet dort ein. Die Nadel ist jetzt bedeckt. Setzen Sie die Schutzkappe **nicht** wieder auf den Pen, um Verletzungen und Infektionen zu vermeiden.

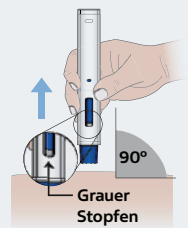

Schritt 8:

Verwenden Sie eine saubere, trockene Watte- oder Mullkompressen, um mehrere Sekunden vorsichtig auf die Injektionsstelle zu drücken. Reiben Sie nicht über die Injektionsstelle und verwenden Sie den Pen nicht noch einmal.

Schritt 9:

Den Fertigpen entsorgen.

- Geben Sie den benutzten Pen sofort nach der Anwendung in einen Nadelbehälter und entsorgen Sie ihn nicht über den Hausmüll.
- Verwenden Sie Abfallbehälter für scharfe Gegenstände nur einmal.
- Wenn Ihre Dosis 675 mg beträgt, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 9 mit dem zweiten und dritten Fremanezumab-Fertigpen, um die vollständige Dosis zu injizieren.
- Fragen Sie Ihren Arzt, Ihre Ärztin, in Ihrer Apotheke oder medizinisches Fachpersonal, wie der Behälter entsorgt werden muss.

Anmerkung:

In der Packungsbeilage finden Sie die vollständige Anleitung zur Verabreichung der Fremanezumab-Injektion.

Ce matériel est purement informatif et ne doit être remis par un médecin à un patient qu'après qu'il a été décidé que le patient recevrait ce traitement.

teva